

DEFINICIONES

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, producirá la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría producir la muerte o una lesión grave.
PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría producir una lesión pequeña o intermedia.
AVISO se usa para abordar prácticas no relacionadas con lesiones personales.

Este equipo cumple con las Regulaciones de la FCC (Federal Communications Commission, Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.), Parte 15 e ICES-003 para un Dispositivo digital de Clase B de Industry Canada. La operación está sujeta a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar una interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están designados para proporcionar una protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia nociva en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión (que se puede determinar al encender y apagar el equipo), se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o un técnico en radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Etiqueta de cumplimiento con ICES-003 de Industry Canada: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

No modifique este producto de ninguna manera. Cualquier cambio o modificación que no cuente con la aprobación expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

¿NO ESTÁ SATISFECHA CON LOS RESULTADOS?

¿Tiene comentarios o inquietudes?
CONTACTA A CHRISTINA BOVES

Si lo desea, antes de devolver su DermaWand, puede escribirle directamente a Christina, la creadora de DermaWand a: christina@DermaWand.com

Describa sus inquietudes y ella le enviará, a través de un correo electrónico, soluciones y consejos útiles para que disfrute el uso de su DermaWand y obtenga los maravillosos resultados que miles de mujeres ya han logrado.

DermaWand®

Un (1) año de garantía, a partir de la fecha de compra, cubre materiales y mano de obra. Para recibir el servicio de reparación previsto en la garantía, envíe su DermaWand a:

DermaWand
150 Stewart Parkway, Greensboro, GA 30642

www.dermawand.com

© 2015 ICTV Brands Inc.

DermaWand® es una marca registrada de ICTV Brands Inc.

IMPRESO EN EE. UU.

Class II Appliance



INSTCBGSPR4
SP V3/15
0615

Patentado

DermaWand®

Guía de belleza



Christina Boves,
creadora de DermaWand, 58 años.

*Diseñado para reducir
la aparición de:*

- ~ Ojeras.
- ~ Líneas de expresión y arrugas.
- ~ Poros abiertos.
- ~ Cansancio y flacidez facial.



ATENCIÓN: Lea este manual antes de utilizar este producto. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones de seguridad en este manual puede dar como resultado heridas graves. Mantenga este manual en un lugar seguro para referencias futuras.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

⚠️ ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
PELIGRO: Para reducir el riesgo de electrocución:

- Siempre desenchufe DermaWand® inmediatamente después de usar.
- No use DermaWand® durante un baño.
- No coloque ni almacene DermaWand® donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera lavamanos.
- No coloque DermaWand® en el agua ni lo deje caer allí ni en ningún otro líquido.
- No trate de alcanzar a DermaWand® que haya caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- DermaWand® es una unidad sellada, no intente abrir la carcasa. Si está dañada, llame al Servicio al cliente.

⚠️ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

- DermaWand® nunca debe dejarse sin supervisión mientras está enchufado en un tomacorriente.
- Se debe supervisar de cerca cuando DermaWand® es usado cerca de niños o personas con discapacidades.
- Use DermaWand® solo para su uso previsto tal como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
- Nunca haga funcionar DermaWand® si tiene un cable o conector dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído en el agua. Llame al Servicio al cliente para coordinar la devolución de DermaWand® a un centro de servicios para su examen y reparación.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- Nunca use DermaWand® mientras duerme o tiene sueño.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en un orificio de DermaWand®.
- No use DermaWand® en el exterior ni lo haga funcionar mientras se administra oxígeno o se usan productos en aerosol (spray).
- No use DermaWand® cerca de líquidos ni sustancias inflamables.
- Conecte DermaWand® a un tomacorriente con descarga a tierra únicamente. Este producto tiene un conector con polaridad (una pata es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, este conector solo entra de una sola manera en un tomacorriente con polaridad. Si el conector no entra completamente en el tomacorriente, invierta el conector. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente obviar esta característica de seguridad.
- No use DermaWand® si está embarazada, planea quedar embarazada, si tiene un marcapasos, si tiene vasos capilares rotos u otro problema cutáneo.
- No use DermaWand® en membranas mucosas (ojos, orejas, nariz, boca).
- No use DermaWand® internamente.
- Séquese completamente las manos antes de usar DermaWand®.
- No sostenga DermaWand® en la punta o en la cubeta. Mantenga la mano detrás de la pestaña.
- No use DermaWand® si la cubeta está dañada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Patentado

DermaWand®

Regátele un DermaWand® a sus amigos y familiares como regalo especial. Ellos también pueden mejorar su apariencia y apreciar los maravillosos beneficios del DermaWand®.



A manera de agradecimiento, puede canjear este cupón de \$50.00 en la compra de un DermaWand® basado en la oferta del infomercial de televisión. Esta incluye un DermaWand® estuche para cosméticos, guía de belleza, garantía por 30 días, Pre-Face, Hydra Infusión y Skin Mist de DermaVital™; todo esto para un familiar o ser querido.



#DW-003-5

Para canjear el cupón de regalo de \$50.00 llame al servicio de atención al cliente al 1-800-976-4129 de lunes a viernes de 9:00 am a 9:00 pm EST, y sábado de 10:00 am a 4:00 pm EST, mencione que desea comprar el DermaWand® ofrecido en el infomercial y que le descuenten el valor del cupón del precio de compra. Digale al operador el número del cupón, así como la información de adónde desea que le sea enviado el DermaWand® anunciado en el infomercial. * Limite uno por cliente

Esta oferta está amparada por International Commercial Television Inc. una empresa estadounidense cotiza en la bolsa en el mercado de valores OTCCB. El símbolo comercial de ICTV Brands Inc. DermaWand® y DermaVital™ son marcas registradas propiedad de ICTV Brands Inc.


BULBOS ROTOS

El bulbo no está cubierto por la garantía de DermaWand®. Coloque siempre la tapa sobre el bulbo de cristal cuando no se lo use. Tenga cuidado de no dejar caer el DermaWand® porque el bulbo de cristal podría romperse. Para la reparación de un bulbo roto, llame al servicio de atención al cliente al 1-866-677-0993. Se cobrará la suma de \$25.00 USD por gastos de envío y de reparación. Para mayor información o políticas y procedimientos de devolución, véase la página 10.

DermaWand® - Política y Procedimientos de Devolución

Su DermaWand® viene con una garantía de reembolso de 30 días. Si Usted no está completamente satisfecho y desea devolver su producto dentro de los primeros 30 días después de la recepción de su producto, por favor póngase en contacto con servicio al cliente al 1-800-976-4129 para obtener una autorización de devolución - de lunes a viernes de 9:00 am a 9:00 pm EST y sábado de 10:00 am a 4:00 pm EST

- Su período de prueba de 30 días comienza a partir de la recepción de su DermaWand® según lo confirmado por el número de rastreo asociado a su envío.
- Las peticiones de devolución ser autorizadas por un representante de servicio al cliente con el fin de validar la autorización de devolución se y emitirá una etiqueta de devolución.
- Los reembolsos para las devoluciones calificadas serán emitidos dentro de los 30 días siguientes a la recepción de su DermaWand® y se aplicarán al método de pago original utilizado para su pedido inicial
- Consulte la hoja de embalaje para instrucciones adicionales de devolución.

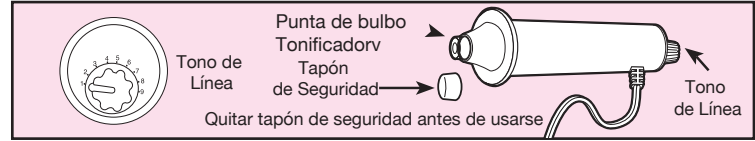

LEA LA GUÍA DE BELLEZA Y VEA EL DVD WATCH-IT-ONCE.

Sea paciente, puede llevarle hasta una semana en comenzar a ver los increíbles resultados. Si lo usa de forma continua, estará sorprendida.


ESE COSQUILLO ¡Permítase unos días para acostumbrarse!

El cosquilleo que sentirá con DermaWand® es único. Se trata de DermaWand® que realiza esta simulación, ayudando a rejuvenecer la apariencia de la piel. Comience en el ajuste 1 y con los días incremente gradualmente este ajuste.

ESE OLOR CURIOSO Lo terminará amando. Es la esencia natural del oxígeno limpio y enriquecido que se está produciendo y colocando en la superficie de la piel.

ENROJECIMIENTO EN LA PIEL: Es muy IMPORTANTE aplicar el tratamiento de belleza prefacial o una crema humectante suave ANTES de usar el DermaWand® por la mañana y la noche después de haberse limpiado la cara. Si efectivamente experimenta un enrojecimiento en la piel, simplemente deje de usar DermaWand® durante un par de días hasta que el enrojecimiento haya desaparecido. Comience nuevamente con un ajuste más bajo y NUEVAMENTE asegúrese de aplicar el tratamiento prefacial antes de usar DermaWand® para realizar los movimientos y ejercicios generales. Una vez que haya terminado de usar DermaWand®, aplique el tratamiento de belleza de hidrainfusión y vaporización en la piel o su propia crema humectante facial. (NOTA: Si experimenta enrojecimiento o hinchazón excesivos, deje de usar el producto).

¡Vea usted misma los resultados...
 después de usar DermaWand dos veces al día por unas cuantas semanas!

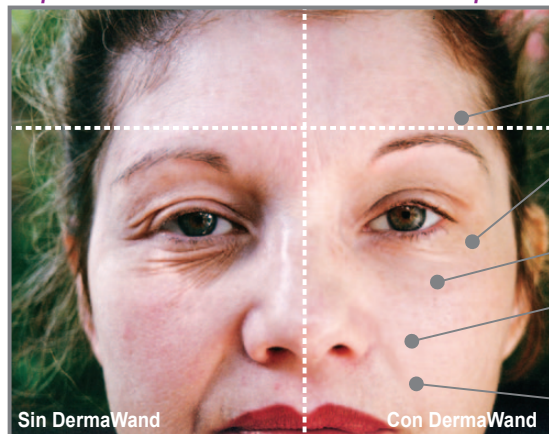

- Las cejas se ven levantadas
- Ayuda a prevenir la aparición de pliegues en la piel
- Suaviza las líneas de expresión y arrugas
- Disminuye la inflamación de las mejillas El tamaño de los poros se ve reducido
- Minimiza la línea de la sonrisa

No se hicieron retoques cosméticos ni fotográficos para mostrar los resultados en el rostro de Christina Boves


¿CUANTO TIEMPO DEBEN SER MIS TRATAMIENTOS?

EL BARRIDO DE 3 MINUTOS: Un barrido facial general de tres minutos, dos veces al día es el tratamiento DermaWand® mínimo recomendado.


RUTINA DE EJERCICIO DOS VECES AL DÍA: Desde la barbilla a la frente, aquí estas los mismos ejercicios que fueron realizados por 17 minutos, dos veces al día, por las mujeres quienes participaron en la “Prueba de efecto levantador” DermaWand® a 100 personas placebo cegado doble, en 30 días independientes. Los resultados de la prueba fueron asombrosos. Los ejercicios de la prueba están en las páginas 6 & 7 o vaya a <http://youtu.be/tQGopKc3D4s> para ver el video en esta prueba.

VISO LEGAL: El DermaWand® no pretende diagnosticar, mitigar, tratar o corregir trastornos o enfermedades específicas de la piel. DermaWand® es sólo para uso cosmético y de relajación.

FRENTE: Aplicar una crema hidratante y el uso del bulbo, jale la piel de la frente hacia la línea del cabello con un ligero movimiento de zig - zag. Una vez que llegue a la línea del cabello, mantenga la varita en la piel manteniendo la piel presionada delicadamente durante 15 segundos. Haga este ejercicio tres veces en cada lado de la cara comenzando en el borde interior de la ceja, luego el centro de la ceja, y por último desde el borde exterior de la ceja

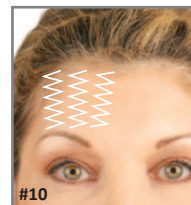

ENTRE LAS CEJAS: Aplicar una crema hidratante y utilizar la varita para realizar el movimiento en zig - zag desde la parte superior hasta el fondo sobre ambas líneas. Repita este ejercicio durante 45 segundos.

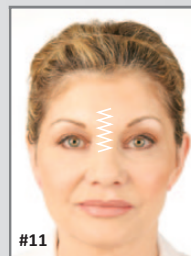

EL SEGUNDO PASO: Una vez que haya completado los 11 ejercicios, hacer una segunda pasada que dura no más de 4 minutos en todos o algunos de los ejercicios, concentrándose en sus áreas problemáticas .

IMPORTANTE

Siempre aplicar una buena crema o loción para la piel antes de usar sus DermaWand®. Para área facial y la frente en general utilizar una crema hidratante, y para el área de los ojos, incluyendo las patas de gallo, utilice una crema de ojos.



#7

LÍNEAS DEBAJO DEL OJO: Nota - aplicar una buena crema de ojos para este ejercicio. Ahora mover la varita de la esquina interna del ojo y con un solo movimiento se desliza hasta la esquina exterior del ojo. Haga este ejercicio durante 30 a 40 segundos, y luego repita en el otro ojo. **NO USE EL NIVEL TONIFICANTE CUALQUIER NIVEL SUPERIOR A 5 PARA ESTE EJERCICIO.**



#8

PATAS DE GALLO: Aplicar una buena crema de ojos para este ejercicio. Realice movimientos circulares mientras sostiene la varita en esta área. Haga esto durante 30 a 45 segundos por cada lado.



#9

ÁREA DE LA CEJA: Aplicar una crema hidratante y luego ir desde el borde interior de la ceja y deslizar lentamente la varita hasta la línea del cabello. Ahora repita este movimiento desde el borde central de la ceja a la línea del cabello, y luego desde el borde exterior de la ceja a la línea del cabello. Repita este triple ejercicio 5-6 veces en cada ojo.

TRATAMIENTOS DERMAWAND DOS VECES AL DÍA.

Siga el siguiente procedimiento durante 3 minutos por las mañanas y por las noches.

- PASO 1:** Antes de iniciar los tratamientos, limpie su piel con su crema limpiadora favorita y enjuague con agua tibia.
- PASO 2:** Séquese la cara completamente con una toalla suave después de limpiarla y enjuagarla.
- PASO 3:** Aplique Pre-Face, o la crema hidratante de su preferencia, suavemente con los dedos sobre la cara (una cantidad del tamaño de una moneda), dando atención especial a la delicada zona de los ojos.
- PASO 4:** Al utilizar el DermaWand por primera vez, se recomienda usar el nivel 1. **Asegúrese de retirar la tapa del bulbo.** Haga una prueba en el dorso de su mano. Si se usa por primera vez o si dejó de usarlo varios días, el bulbo puede tardar hasta un minuto en encenderse.
- PASO 5: ¡ESA SENSACIÓN ÚNICA DEL DERMAWAND!** Coloque el bulbo de cristal sobre la piel de su cara, (recuerde retirar la tapa) para percibir la sensación de DermaWand. Úselo en el nivel más bajo durante los primeros días, hasta que su piel se acostumbre. Cuando ya no perciba las sensaciones estimulantes (una especie de hormigueo), significa que su piel está lista para el siguiente nivel. Continúe incrementando la intensidad poco a poco, hasta su máximo nivel de tolerancia. El DermaWand es eficaz, incluso en el nivel de ajuste más bajo, y la tolerancia depende de la sensibilidad de su de piel.
- PASO 6:** Comience a deslizar el DermaWand por toda la cara.
- PASO 7:** Después de terminar su rutina general, comience algunos o todos los ejercicios mostrados en esta guía. Mientras más ejercicios realice cada día, más rápido disfrutará su nueva apariencia.

Realice los 11 siguientes ejercicios dos veces al día en secuencia de # 1 y terminando en # 11 .



CARA: Aplicar una crema hidratante, y luego deslizar la varita por toda la cara y el cuello, ya sea en un movimiento lineal o circular durante 90 segundos. Para las arrugas muy profundas, la concentración en esas áreas para un extra de 30 a 40 segundos cada vez. Sea paciente, las líneas y las arrugas tardan más en responder. Asegúrese de que usted está moviendo continuamente DermaWand® alrededor de su cara.




CUELLO: Aplicar una crema hidratante, y luego empezar en la parte inferior de la zona del cuello y lentamente deslice la varita hacia arriba por la barbilla. Luego regrese a la parte inferior de la zona del cuello, y repetir esto 6-8 veces haciendo un movimiento completo en forma de "V".



BARBILLA: Aplicar una crema hidratante a la zona de la barbilla. Ahora empieza en el centro, justo debajo de la barbilla, y mueva la varita hacia afuera a lo largo de la línea de la mandíbula hasta el lóbulo de la oreja, en movimientos circulares pequeños, cerca del tamaño de una moneda de 25 centavos. Haga esto 30-45 segundos en cada lado.

ARRUGAS ALREDEDOR DE LA BOCA:

Aplicar una crema hidratante y luego en un lado comience en la parte inferior, centro de la barbilla y mueva la varita hasta la esquina de los labios en un movimiento en zig-zag. Repita este ejercicio durante 30 segundos y luego hacer el otro lado durante 30 segundos.

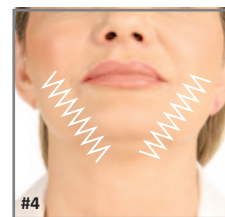

PLIEGUES NASOLABIALES:

Aplicar una crema hidratante, y luego realizar un movimiento en zig-zag con la varita, comenzando en la parte inferior y siguiendo el perfil del pliegue a la parte superior. Haga este ejercicio durante 30-40 segundos en un lado de la cara, y luego repita en el otro lado.



MEJILLAS: Aplicar una crema hidratante y con un movimiento circular, mueva la varita de la esquina de la nariz al otro lado de la esquina de la parte delantera superior de la oreja. Realice este ejercicio durante 30 segundos, y luego repita en el otro lado de la cara.

